


CREAGE

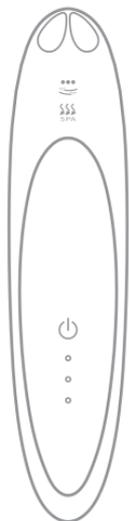

取扱説明書

家庭用美容器
アイリフト
CR-01

保管用
保証書付

目次

Contents

はじめに	/2
安全上のご注意	/2
海外でのご使用について	/13
各部のなまえとはたらき	/15
お使いになる前に	/18
使いかた	/23
使い終わったら	/30
お知らせ	/33
● 故障かな?と思ったら	/33
● よくあるご質問	/35
● 製品仕様	/37
アフターサービス	/38

はじめに

このたびは、製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ・ 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- ・ お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- ・ 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ・ ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・ 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・ 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ・ 故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ・ ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・ 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

▶ 注意区分について

⚠ 危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

▶ 図記号について

⊘ してはいけないことを示しています。

❗ しなければならないことを示しています。

⚠ 注意しなければならないことを示しています。

危険 (ご使用、保管に関して)

- 次に該当する人は使用しない。
医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。
- ◆ 医用電気機器を使用している人
 - ・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器
 - ・人工心臓など生命維持用医用電気機器
 - ・心電計などの装着型医用電気機器



禁止

警告 (ご使用、保管に関して)

- 次のような人は使用しない。
事故やトラブルの原因となります。
- ・医師の治療を受けている人・成長過程の人
- ・急性疾患・結核性疾患・発熱している人
- ・高血圧・伝染病疾患・悪性腫瘍・血液疾患
- ・内臓疾患・皮膚病・アレルギー体質
- ・アトピー性皮膚炎・皮膚トラブルがある人
- ・敏感肌、お肌の弱い人
- ・物理的刺激などによる病的なシミのある人
- ・過度の日焼けでお肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人
- ・強度近視の人(-6D以上)
- ・目や顔の手術を受けた人
- ・目や顔に疾患がある人および治療中の人
- ・疲労が激しい人・体調がすぐれない人
- ・酒気帯びの人・妊娠中、生理中、授乳中の人
- ・眠気をさそう薬を服用中の人
- ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人



禁止

警告 (ご使用、保管に関して)

- 指定の部位以外や次のような部位には使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

- ・切り傷・手術(整形手術を含む)をした部位
- ・美容施術をした部位・口内や陰部、粘膜など
- ・にきび・皮膚が化膿し炎症を起こしている部位
- ・かゆみやほてりのある部位・膨らんだホクロ
- ・ウイルス性のイボ・のどぼとけ・眼球・まぶた
- ・頭部・鼻骨

※ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。

- 皮膚が薄い部位、骨のすぐ上には長時間使用しない。

お肌や身体のトラブルを生じる原因となります。

- 火中投入・加熱・高温での充電・使用・放置をしない。

本製品は充電式電池を内蔵しています。発熱・発火・破裂の原因となります。

- サウナや岩盤浴へは絶対に持ち込まない。

本体が高温になり、けがややけどの原因となります。

- 浴室内に放置しない。浴室内や水の入った容器の近くで充電しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

- 本体を水につけたり、洗ったりしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



禁止



水かけ禁止

警告 (ご使用、保管に関して)

- 本体や充電台は子供の手の届かない場所に保管し、使わせない。

事故やけがの原因となります。

- 自分で意思表示ができない人に使わせない。また、身体の不自由な人だけでの使用は避ける。事故やけがの原因となります。

- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

けがや故障の原因となります。

- 分解や修理・改造はしない。

火災・感電・けがの原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

- 異臭・異常発熱したときは使用を中止する。

破損や発火の原因となります。



使用者の制限



用途以外禁止



分解禁止



異臭・異常発熱時
使用禁止

警告 (ご使用、保管に関して)

- 火のそばや炎天下、ほこりっぽい場所で使用したり、放置したりしない。また、熱器具に近づけない。

発熱・発火・破裂の原因となります。

- 火気に近づけない。また、直射日光の下、電気カーペットの上に放置しない。

発熱・発火・破裂の原因となります。

- 慣れるまではレベルLOWで使用する。

お肌を痛める原因となります。

- 不安定な場所に置かない。また、本体を落としたり、ぶつけたりしない。

故障の原因となります。また、足の上などに落とすとけがの原因となります。

- 電子レンジや高圧容器に入れない。

発熱・発火・破裂の原因となります。



発火注意



必ず守る



落下禁止



破裂注意

注意 (ご使用、保管に関して)

- 本体を熱湯やドライヤーの熱風にさらさない。本体が変形したり溶けたりする原因となります。
- 本体にヒビやメッキ剥がれがあったり、不具合がある場合は使用しない。お肌を痛める原因となります。
- 本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。本体の表面に損傷を与える原因となります。
- ボタンやバックルの上から使用しない。故障の原因となります。
- ベットには使用しない。けがの原因となります。
- 力を入れてお肌にこすりつけない。特に皮膚が薄いところに力を入れてこすりすぎない。お肌を痛める原因となります。



禁止

注意 (ご使用、保管に関して)

- アクセサリー類(ネックレス、ピアスなど)は、必ず外す。
アクセサリー類を巻き込むおそれがあります。
- 必ずメイクを落として使用する。
メイクの上から使用すると、ファンデーションによりお肌が黒く汚れることがあります。
- 以下の項目は必ず守る。
事故やけが、本体の故障原因となります。
 - ・お肌の状態にあわせて使用する。
 - ・お肌に発疹、炎症、かゆみ等の異常を起こしている場合は使用しない。
 - ・日焼け直後、ピーリングやパックのお手入れとの併用は控える。
 - ・使用後は必ず電源をオフにする。
- 使用中に身体に違和感がある場合は、使用を中止する。
お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。
- 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベルLOWから使用する。また、EMSの刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。
レベルは少しずつ調節してください。事故やけがの原因となります。



必ず守る

注意 (ご使用、保管に関して)

- 肌表面にピリピリとした痛みを感じた場合は、レベルを下げたり、部位をずらして使用する。または水・ローション・ジェルなどでお肌を湿らせてから使用する。
そのまま使用すると、お肌を痛める原因となります。
- 使用中に疲労を感じたり、お肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止する。
翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。
- 歯の治療をした人(インプラント・矯正・銀歯等)、歯に詰め物がある人は、EMSの刺激により歯に違和感を感じる場合があります。
レベルを下げ、使用部位を調節してお使いください。
EMSによりほお・あごに刺激を強く感じたり不快に感じたりする場合があります。強い違和感を覚える場合は、医師にご相談ください。
- 同一部位に10分以上の使用は避ける。
過度なご使用はお肌を痛める可能性があります。あくまでも目安ですので、お肌の状態をみながらご使用ください。



必ず守る

警告 (電源に関して)

- ケーブルが傷んでいるときや、USBプラグの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



傷んだ
コードプラグ
使用禁止

- 万一、異常が発生したら、本体の電源をオフにする。また、充電をしているときはUSBプラグをすぐに抜く。

けむり・異音・異臭がするなど、異常状態のまま使用しないでください。

- ケーブルを抜くときは、必ず先端を持って引き抜く(金属部に触れないようにする)。また、濡れた手で抜き差しはしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

- ケーブルに水がかからないようにする(水につけたり、洗ったりしない)。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

万一こぼれたときは、ショートや感電のおそれがありますので、ただちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。



プラグを抜く



水かけ禁止

警告 (電源に関して)

- ケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。

また、重いものを乗せたり、挟み込んだりすると、ケーブルが破損し、火災や感電の原因となります。

- 充電端子とUSB端子に水が付着していないことを確認してから充電する。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

- 使用しないとき・お手入れするときは必ず電源をオフにする。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

- 地震や雷を感じたら使用を中止し、電源を切る。充電中の場合はACアダプターをコンセントから抜く。



無理な扱い
禁止



必ず守る

海外でのご使用について



- 必ず交流100~240Vで使用する(無料修理は日本国内のみ)。
火災・感電・故障の原因となります。



必ず守る

- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。
発熱・発火・故障の原因となります。




発火注意

- ・地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
- ・プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店などにご相談ください。

各部のなまえとはたらき

本体

●正面

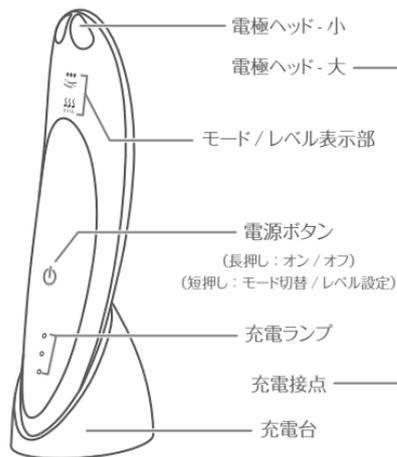

●背面



付属品


●充電台

●USBケーブル(タイプC)*

*本製品以外では使用しないでください。

●取扱説明書

(保証書付)

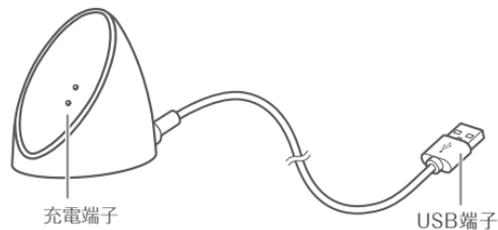

本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のために予告なく変更する場合があります。

はたらき

EMS

電氣的に筋肉を刺激します。

ヒーター

39℃の心地よい温感でお肌を温めます。

オートオフ機能

モードを設定してから約10分が経過すると、自動でオフになります。

お使いになる前に


使用上のご注意

お使いになる前に、以下の内容をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- アクセサリ類(ネックレス、ピアスなど)は、必ず外してください。
- 必ずメイクを落としてください。
メイクの上から使用すると、ファンデーションによりお肌が黒く汚れることがあります。
- 本製品を初めてご使用になるときは、必ずプレテストを行ってください(P.21)。
- 使用するときは、水またはローション、ジェルなどでお肌を湿らせてから、直接お肌に本体をあててください。
- 以下の使用時間、使用頻度を目安にご使用ください。
1部位1回10分以内、1日合計30分以内

充電する

家庭用コンセントを使用する

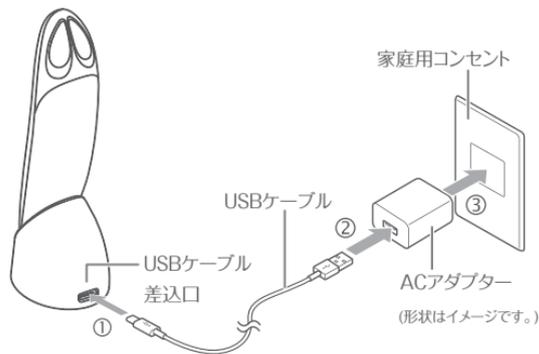


- ・充電中は充電ランプが点滅します。
- ・充電が完了すると、充電ランプが点灯します。
- ・室温約25℃の場合、約2時間で満充電となります。電池残量や充電環境によって、充電時間や動作時間は前後します。

ご注意

- ・本体、充電端子、USB端子に水滴がついている場合は、水滴をしっかり拭き取ってください。水滴が残ったまま充電すると、感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- ・購入後初めて充電するときは、完全に充電が完了してから使用してください。
- ・初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電表示でも短時間しか使用できないことがあります。その場合は、再度充電してからご使用ください。

パソコンを使用する

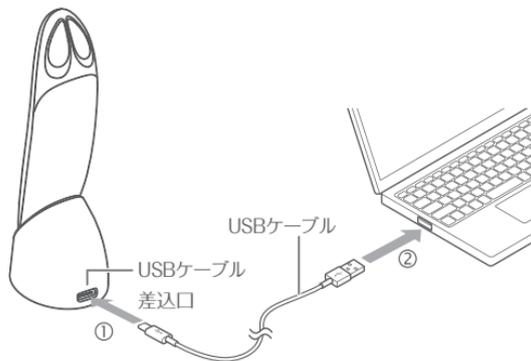

お肌へのプレテスト

初めてご使用になるときは、必ずお肌との相性をプレテストしましょう。

⚠ 注意

- お肌と本製品の相性を確認するため、必ず事前に実施してください。
- 実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止してください。
- お肌に異常を感じた場合は使用しないでください。

1

腕の内側を石鹸で洗い、タオルなどで拭き取る

2

洗ったところに水またはローション、ジェルなどを塗り、電源をオンにしてリフトモードで約2分間使用する(P.23)

必ずレベルLOWでテストを行ってください。

3

お肌に異常がないことを確認する

24時間以内にお肌に赤みやほてりを感じなければ、本製品をご使用ください。



持ちかたと
お肌へのあてかた。



図のように本体を持ち、電極
ヘッド全体をお肌にあてて、
ご使用ください。

使いかた


基本的な使いかた

水またはローション、ジェルなどで十分に保湿してからご使用ください。
※お肌が乾いた状態ではEMSを感じにくくなります。

1

電源をオンにする

※電源オン時は安全のためレベルLOWに設定されています。

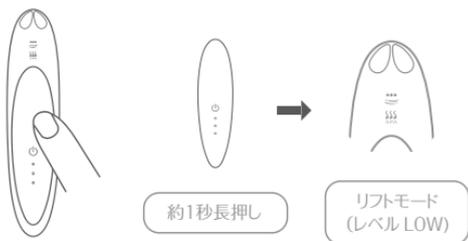

注意

- モードを設定した時点から約10分後電源がオフになります。
使用途中でモード変更するとその時点から約10分後にオフとなるため、使用時間にご注意ください。

2


モード・レベルを選ぶ

スイッチを押すたびに、モードとレベルが以下の通りに切り換わります。

レベルはLOW、HIGHの2段階あります。

電源ボタンでレベルの調整をします。

使いはじめは必ずLOWから使用してください。

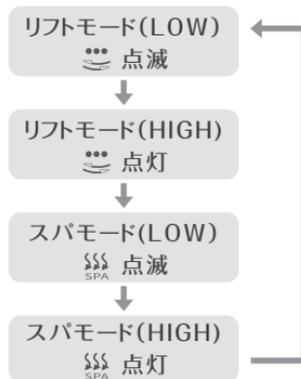

リフトモード・・・EMSの刺激でお顔の筋肉を刺激します。

スパモード・・・お肌を温めながら、EMSの刺激でお顔の筋肉を刺激します。

ご注意

- ・使い始めは必ずレベルLOWでご使用ください。
- ・無理のないレベルを選んでご使用ください。

お肌にあてる

本体をお肌に軽くあてながら滑らせます。
1か所に止めての使用もできます。



顔に使用する場合は下から上へ、顔の中心から外側へ滑らせてください。

各部位へのあてかたは、「各部位へのあてかた」(P.26)をご参照ください。

ご注意

- ・お肌に強く押しあて過ぎないでください。
- ・お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わないときは使用をおやめください。

電源をオフにする

電源ボタンを長押しします(約1秒)。

各部位へのあてかた

以下のように本体をあてると効果的です。

! 注意

- メイクを落として使用する。
- アクセサリ(ネックレス、イヤリング等)は外して使用する。

顔に使用する(10分)

使用モード:リフトモード、スバモード

下図の通り、①～⑤の順に矢印の方向へ動かしてください。



- ①首すじに沿って上から下へ
- ②額からこめかみに向かってジグザグに
- ③口角から耳の横へ
- ④フェイスラインから耳の横へ
- ⑤首すじに沿って上から下へ

ご注意

- ・EMSが歯の神経に刺激を与える場合があります。強くあて過ぎず、レベルを下げるか、部位をずらしてご使用ください。特に歯の治療中の方、歯に詰め物がある方はご注意ください。
- ・首すじに使用する場合は、EMSの刺激が強く感じられる場合がありますのでご注意ください。

●ほお



お肌を持ち上げるようにします。
ほおや気になる口もとを鍛えましょう。

●鼻すじ



1か所に止めて使い、鼻の横の筋肉を刺激します。
心地よい刺激を感じるようレベルを調節しましょう。

※個人差があるためご自身が使いやすい方法でご使用ください。

●フェイスライン



軽く押しあてながら下から上にやさしく滑らせます。
耳の下で止めて使用すると効果的です。
心地よい刺激を感じるようレベルを調節しましょう。

●目もと

<こめかみと生え際の間>



こめかみと生え際の間をしっかり止めて使います。

<目の下>



お肌にスタンプを押すように、目もとの内側から外側へ向かってやさしく動かします。

<目の周り>



電極ヘッド・小を使って、目の周りをポイントで押すように使用するのをおすすめです。

額や口まわりにもおすすめです。

デコルテ・肩に使用する(10分)

下図の通り、①～③の順に矢印の方向へ動かしてください。



①鎖骨に沿って内側から外側へ

②首すじに沿って上から下へ

③首の付け根から外側へ

ご注意

首すじに使用する場合は、EMSの刺激が強く感じられる場合がありますのでご注意ください。

使い終わったら

お手入れのしかた

使用後は本体を清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。



警告

- お手入れするときは、必ず電源をオフにする。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。

1

本体・電極ヘッドの汚れは、水を含ませて固く絞った布で拭き取る。

電極や充電端子に水分や汚れが残らないように十分にふき取ってください。

2

全体を乾いた布で拭き、水分を拭き取ってから、保管する。

本体に汚れや水分が残ったまま放置すると、故障やおいの原因になることがあります。

ご注意

- 水洗いしないでください。
- ジェル、クリームなどが付着した状態で放置しないでください。
- 充電端子に水分が残らないようにしてください。
- アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。



保管のしかた

- 使用後は、必ず汚れや水分を拭き取り十分に乾燥させてから保管してください。本体に汚れや水分がついた状態で放置すると、充電端子や本体内部が腐食する原因となります。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、パソコンからUSB端子を抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に放置しないで、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」(P.33)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.41)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

お知らせ

故障かな?と思ったら

本製品をご使用中に異常を感じたら、修理を依頼する前に以下をご確認ください。

こんな症状	考えられる原因と処置方法
電源が入らない	→ 電源ボタンを約1秒長押ししてください。
	→ 電池残量がありません。充電してください(P.19)。
充電しても 数分しか使えない	→ 電池残量が少なくなっています。 充電してください(P.19)。
	→ 電池の寿命です。販売店またはヤーマン コールセンター(P.41)にご連絡ください。
充電が 開始されない	→ ACアダプターのプラグを 壁面コンセントに差し込んでください(P.19)。
	→ USB端子とパソコンを 正しく接続してください(P.19)。
電源がオフになる	→ 長押ししている場合は、手を放してください。
	→ 電源をオンにしてモード設定してから 約10分後に自動でオフになります。

こんな症状	考えられる原因と処置方法
EMSが強い (ビリビリする・痛い)	→ 設定レベルが高いので、レベルを下げてください。 初めて使うときは必ずレベルLOWで 使用してください。
EMSが弱い	→ 設定レベルが低いので、レベルを上げてください。
	→ 本製品は顔専用機です。 身体(デコルテから下)へのご使用では、 出力が低く刺激を感じない場合があります。
	→ 電極ヘッドをお肌にあててください。
EMSを感じない	→ お肌が乾燥している場合は、水またはローション、 ジェルなどで湿らせてからご使用ください。
	→ 使用中に誤って電源ボタンを押していないか 確認してください。
	→ 電池残量が不足している場合は、 充電してください。
	→ 電極ヘッドをお肌にあててください。
EMSを感じない	→ お肌が乾燥している場合は、水またはローション、 ジェルなどで湿らせてからご使用ください。

よくあるご質問

Q： 使用時間、使用頻度の目安はありますか？

A： 1 部位 1 回 10 分以内、1 日合計 30 分以内
※上記はあくまでも目安です。お肌の状態をみながらご使用ください。

Q： 力を入れて本体をあてる方が良いですか？

A： 力を入れすぎるとお肌を痛める原因になります。特に顔へのご使用は力を入れずにやさしく本体をあててください。
ご自身が心地よく感じる強さで動かしてください。

Q： お風呂で使用できますか？

A： 本製品は防水製品ではありません。お風呂では使用しないでください。

Q： サウナや岩盤浴で使用できますか？

A： サウナや岩盤浴など、本体が高温になる場所ではやけどの危険がありますので絶対に使用しないでください。

Q： お肌が乾いた状態でも EMS は使用できますか？

A： お肌が乾いた状態では、EMS の刺激を感じにくくなる場合があります。
EMS が弱いと感じる場合は、お肌を水またはローション、ジェルなどで湿らせてからご使用ください。

Q： 敏感肌なのですが使っても大丈夫ですか？

A： 使い始めは二の腕などの目立たないところへご使用いただき、お肌の様子を確認してください。お肌に異常がなければご使用いただけます。
お肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。

Q： メイクの上から使用できますか？

A： ファンデーションによりお肌が黒く汚れるおそれがあるため、メイクを落としてからご使用ください。

製品仕様

電源定格	DC5V 0.4A
消費電力	約3W(本体充電時)
使用電池	リチウムイオン蓄電池
充電時間	約2時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します。
外形寸法	本体:約W32×D28×H134(mm)
製品質量	本体:約60g
材質	本体:ポリカーボネート 電極ヘッド:ステンレス
製造国	中国
付属品	充電台……………1個 USBケーブル(長さ:0.5m、Type-C)……………1個 取扱説明書(保証書付)

アフターサービス

充電池について

- 充電池は消耗品です(保証対象外)。
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は300回が目安です)。
- 充電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.41)にご相談ください。

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。



内蔵電池の取出方法

この製品に使用しておりますリチウムイオン蓄電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。

- 電池が内蔵された機器は、廃棄する前に電池を取り外してください。
- 電池を取る前には必ず電源をOFFにしてください。
- 電池を取り出す際はドライバーを使用し、お怪我が無いように十分に注意しながら取り出してください。
- 電池を取り出す際は固いもの等で電池を傷つけないようにご注意ください。※発熱、発火の原因となります。
- 外した電池は自治体の分別ルール(廃棄やリサイクル方法)に従って、処理をお願い致します。

●操作STEP

下図①～⑤を参照し、電池を取り出してください。

1

先の細いものなどを使って本体付け根部分の銀色のカバー部品を取り外します。




2

2ヶ所のゴムと栓を外した後、2つのネジを外します。




3

先の細い物などを使って内ケースを外した後、内ケースを裏返し、バッテリーケーブルを外します。

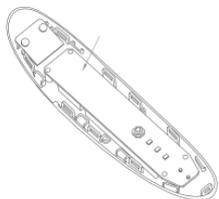

4

内ケースからバッテリーを取り外します。

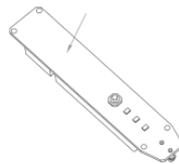

⚠ 注意

- この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。
お客様ご自身で分解した場合、故障の原因となりますのでご注意ください。

お問い合わせ先

●日本国内からのお問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

受付 9:00~17:00

(土・日・祝日・年末年始を除く)

固定電話など

 **0120-776-282** (通話料無料)

携帯電話・PHS

 **0570-550-637** (通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みっております。

●日本国外からのお問い合わせ先

販売店またはヤーマングローバルサイト(<https://www.ya-man.com/en/>)までお問い合わせください。

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品、付属品は除く)。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただけます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.41)にご相談ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。

- (二) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
- (ホ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合。
- (ヘ) 一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障及び損傷。
- (ト) 車輛・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
- (チ) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
- (リ) 保証書のご提示がない場合。
- (又) 保証書のお買い上げ年月日・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありません。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

No. _____

保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	CR-01
形名	アイリフト		
無料修理保証	対象部分	期間	
	本体のみ	お買い上げ日から 1年間	
※販売者名	店名・住所・電話		
	ご購入日のわかる明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。		

販売店様へのお願い
必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡してください。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。
左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

・個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いについては弊社ホームページ
(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。

・利用目的
お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

固定電話番号



0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHS



0570-550-637 (通話料有料)

受付 9:00～17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

クリアージュ アイリフト

取扱説明書 お詫びと訂正

この度は、アイリフトをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

取扱説明書の記載に一部誤りがございました。
お詫びするとともに下記の通り訂正いたします。

● P.25 使いかたの順番

[誤]

[正]

4

お肌にあてる

本体をお肌に軽くあてながら滑らせます。
1か所に止めての使用もできます。



顔に使用する場合は下から上へ、顔の中心から外側へ滑らせてください。

各部位へのあてかたは、「各部位へのあてかた」(P.26)をご参照ください。

ご注意

- ・お肌に強く押しあて過ぎないでください。
- ・お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わないときは使用をおやめください。

5

電源をオフにする

電源ボタンを長押しします(約1秒)。

3

お肌にあてる

本体をお肌に軽くあてながら滑らせます。
1か所に止めての使用もできます。



顔に使用する場合は下から上へ、顔の中心から外側へ滑らせてください。

各部位へのあてかたは、「各部位へのあてかた」(P.26)をご参照ください。

ご注意

- ・お肌に強く押しあて過ぎないでください。
- ・お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わないときは使用をおやめください。

4

電源をオフにする

電源ボタンを長押しします(約1秒)。